

مدفوع هموگلوبین F-Hb NADAL® FOB رهنمایی مریض برای اخذ نمونه برای معاینه

در هنگام گرفتن معاینه ضرورت است:


- نسخه معاینه ارجاع شده توسط داکتر: الکترونیکی (برچسب - کاس میک) یا هم نسخه معاینه ورقی
- لوله اخذ نمونه از NADAL FOB زفرنس نمبر 272001.
- اگر نمونه با پوست ارسال می شود ضرور است تا: کیسول انتقال و پاکت پوستی با آدرس و هزینه پوستی

این نمونه گیری از مریضان گرفته می شود که آنها در دوره قاعدگی یا عادت ماهوار بسر می برند، این نمونه گیری 3 روز قبل و بعد از این دوره انجام نمی شود. نمونه در هنگام خونریزی بواسیر، خون در ادرار یا در حالت که مریض قبضیت دارد نباید گرفته شود. الکلول، اسپرین (آسپرین) و دیگر دوا ها که به مقدار زیاد مصرف می شود می تواند باعث سوزش دستگاه گوارش شده و سبب خون ریزی پنهانی شود. 48 ساعت قبل از گرفتن نمونه نباید از چنین دوا ها استفاده شود.

این طور انجام دهید:



1. لوله نمونه گیری را پیش از استفاده در درجه حرارت اتاق نگهداری نمایید.
2. لوله و کیسول انتقال و نسخه اخذ نمونه اگر موجود است را با نام، شماره شناسایی و تاریخ اخذ نمونه نشانی کنید. سه نمونه پایین که در تاریخ های مختلف گرفته شده باشد ضروری است تا تشخیص مطمئن انجام شود.
3. مدفوع را روی یک دستمال توالت یا در یک ظرف یکبار مصرف جمع آوری کنید. از رقیق کردن مدفوع با ادرار یا آب از توالت خودداری کنید.
4. لوله نمونه برداری را به صورت راست نگهدارید و سرپوش آبی را باز کنید. مراقب باشید که از بافر خارج نشود!
5. چوب مجموعه نمونه برداری (چوب مارپیچ) را بردارید.
6. نمونه ها را با داخل کردن چوب نمونه در سه نقطه مختلف در نمونه مدفوع جمع آوری کنید. مدفوع فقط در شیارها.

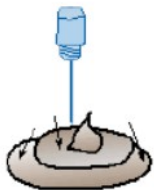



7. چوبک جمع آوری نمونه ای که اکنون حاوی مدفوع است به لوله نمونه قرار داده و محکم بسته کنید.
8. نمونه را تکان دهید تا مواد نمونه مخلوط شود.
9. تجزیه و تحلیل باید در اسرع وقت انجام شود. نمونه ها را برای مدت طولانی در درجه حرارت اتاق نگذارید. نمونه را با درجه حرارت اتاق می تواند بدون مشکل به لابلاتوار انجام شود اما نباید بیش از 2 ساعت طول بکشد. نگهدار کردن در یخچال نباید از 7 روز تجاوز کند.

اگر سوالی دارید زنگ بزنید: کلینیک بخش کیمیا، شماره تلفون : 063-15 41 30